

霉菌酵母测试片

使用说明书

【产品名称】

通用名称：霉菌酵母测试片

英文名称：Handy plate[®] Mold&Yeast Count Plate

【产品编号】HP 003

【包装规格】20 片/包

【产品简介】

Handy plate[®] 霉菌酵母测试片为预制备的即用型培养基产品，含有标准的培养基、冷水凝胶和显色指示剂。本产品可用于食品和饮料中霉菌酵母的测定。

【使用说明】

1.样品制备

取样品 25 g(mL) 放入含有 225 mL 磷酸缓冲液（或生理盐水）的无菌均质杯或均质袋内，均质器混匀 1 min~2 min 制成 1:10 的样品匀液，必要时用无菌 1 mol/L NaOH 或 1mol/L HCl 溶液调节样品匀液 pH 至 6.8~7.2。用 1mL 无菌吸管或移液器吸取 1:10 均液 1 mL，注入含有 9 mL 稀释液的试管内，振摇后成为 1:100 的样品匀液，以此类推制备 10 倍系列稀释的样品匀液，每次换一支吸管。

2.接种

根据对样品污染状况的估计，选择 2~3 个稀释度进行检测。将霉菌酵母检测片置于平坦实验台面，揭开上层膜，用无菌吸管吸取 1 mL 样品匀液滴加到检测片中央，缓缓盖上上层膜，避免产生气泡。静置 3~5min 使样液扩散并重新形成凝胶。

3.培养


将检测片正面向上水平放置 28℃±1℃，培养 48h~72h。

4.判读


计数所有蓝绿色菌落不论大小和清晰度。合适的计数范围在 15 CFU~150

CFU。淡蓝绿色凸起小菌落为酵母，蓝绿色扁平较大菌落为霉菌。若整个培养区域呈淡蓝绿色，可能是菌浓度过高，需对样品进一步稀释以获得确切的计数。如需分离菌落进行进一步分析，揭开上层膜用接种针将菌落挑出使用即可。


【操作图解】

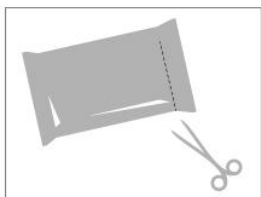


1.用剪刀沿虚线剪开，
取出测试片盒

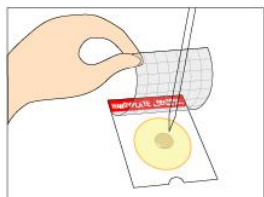


2.将测试片放在水平台面上，
揭开覆膜，将1mL样品液
滴加在纸片中心。

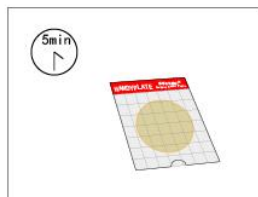

3.缓慢盖上覆膜，
静置3-5分钟。

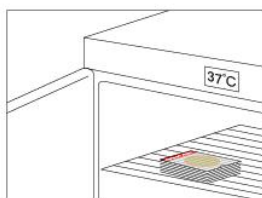

4.将测试片正面朝上，放置于
恒温培养箱中， $36\pm 1^{\circ}\text{C}$ 培
养 $24\pm 2\text{h}$ 。测试片堆叠不应
超过20张。

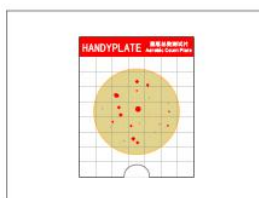

5.根据判读手册判读测试片
上是否有目标菌生长，或
对菌落进行计数。

【操作视频】



(扫描左侧二维码观看操作视频)

【储存条件与保质期】

2~8℃密封储存，有效期为18个月。

已打开包装未使用的测试片装回包装袋中，折叠后用不干胶贴密封，储存时间不超过4周为宜。

【废弃物处置】

测试片在使用之后可能包含微生物，需在121℃ 30min 高压蒸汽灭菌处理后严格遵守生物危害废弃物的处置规定处理。

【生产企业】

企业名称：广东环凯生物科技有限公司

生产地址：肇庆高新技术产业开发区科技大街中13号

销售热线：0758-3680999-8001

技术热线：0758-3680999-8018

邮政编码：526238

企业网址：<http://www.bhkbio.com>